

凛とした 風格。



コンパクトでありながら、
最高機種に見劣りしない重厚感と高機能を
満足のいく心地よい癒しの時間を
演出してくれます。

快王II
massage
chair

選べる3スタイル

快王IIは外観の高級感と風格を追求したデザインとなっております。
更に3タイプを用意し、どのようなロケーションにも対応するラインナップとなっています。

ベーシックタイプ

BASIC
TYPE



スリムボディタイプ

SLIMBODY
TYPE



コインタイマータイプ

COIN TIMER
TYPE



ベーシックタイプ

快王II
massage chair



COMFORT & HIGH QUALITY

座り心地のよいソファのような快適性と高品質な仕上がり。

ひじ掛けを極限まで幅広くし、どっしりとした重厚感とゆったりとした座り心地を実現しました。

快王IIシリーズ 共通機能

無段階で自由に 調節できる 2WAYリクライニング

フットレストと背もたれがそれぞれ個別に動作します。ワンタッチ起き上がり機能も搭載。よりスムーズな操作が可能になりました。快王IIでは初めての終了時自動復帰機能搭載。



スリムボディタイプ

快王II S
massage chair



SLIM & HIGH SPEC

従来のマシンの機能はそのままに、スリムなボディを実現。

快王IIシリーズの機能はそのままに、全幅を10センチスリムにした省スペースモデルです。



4つ玉ならではのきめ細かい動きと多彩なもみ機能で全身をマッサージします。もみ玉には人間の手の感触に近づけるためにシリコンゴムを使用。

人の手のような「もみ&たたき」、そして体を支える背骨をしっかりとローリングできる機能を搭載



肩トップ位置調整機能によって背中中の「もみ&たたき」を始めるポイントを3段階で調整できます。これにより体格差に関係なく、各部位を的確に「もみ&たたき」することができます。さらにローリング機能により、人間の体を支える大切な背骨をしっかりとケアすることができます。また、3段階でもみ玉の幅調整も可能になり、どんな体型の方も背中全体をしっかりとマッサージできます。

◆もみ機能

4つのもみ玉がコリのポイントをしっかりとみほぐします。まるでプロのマッサージ師にもまれていた様な心地良さです。

◆ローリング機能

マッサージ器の基本でもある大切な機能です。このローリングは体を支える背骨を健康に保つ機能で背骨をストレッチするために毎日お使いいただきたい機能です。

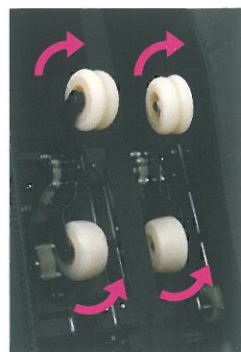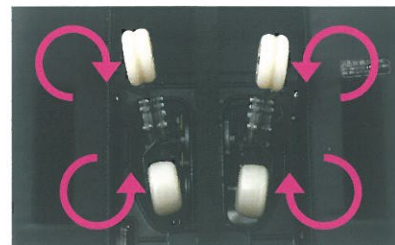

◆たたき機能

快王IIのもみ玉は人の手の感触に近づけるために、シリコンゴムを使用しています。このもみ玉が背中全体をリズムカルにプロ技でたたきほぐします。

コインタイマータイプ

快王IIc
massage chair



SAFETY & DESIGN

業務用機種としての安全性とデザイン性をさらに高めました。

ひじ掛けにコインタイマーを収納することで、デザイン性を損なうことなく、安全性を高めました。

エア圧力の3段階調整ができるメカを搭載

足部エアマッサージは、多重エア構造バルブにより圧力を満遍なく伝えることができます。この多重構造と絶妙な作動設定がプロ技のみみあげ感を再現します。さらに、座面エアマッサージはお尻や足の付け根の血行を促進するのに効果があります。

■正常時



■圧迫時



操作性を重視したリモコン

リモコンは視認性にこだわり使いやすさを追求しました。厳選された3つのコースから、その時の身体の調子に合わせてお選びいただけます。また、自分に合った微調整もお好み次第で出来ます。

リラックスコース

全身をやさしくマッサージするコース

疲労気味の身体をゆったりともみほぐします。首・肩・背中を、硬く張ってしまう前にやさしくケア。リラックス効果の高いコースです。

美脚コース

足とお尻専用のエアマッサージコース

下半身に溜まった疲れの回復は一筋縄ではいきません。美脚コースはふくらはぎからお尻まで、プロ技でもみあげるエアマッサージコースです。

リフレッシュコース

全身疲労対策のためのハード動作中心のコース

硬くなった筋肉は、たたくなどの強い刺激で筋肉をゆるめてやるのが大切です。リフレッシュコースはこのようなハードな疲れに最適なコースです。



業務用でも、ご家庭でも、 ロケーションに合わせて 選べる3タイプ。



●仕様

	快王II	快王II S	快王II C
電源電圧・周波数	AC 100V(50/60Hz)		
定格時間	30分		
消費電力	85W		
タイマー	15分		
もみ回数	約22、29、36回/分		
たたき回数	約400、545、630回/分		
ローリング速さ	3cm/秒		
脚部エア圧力	約27kPa(最大)		
座部エア圧力	約27kPa(最大)		
肩位置調節	3段階		
幅調節	3段階		
リクライニング角度	電動無段階(約121~161度)		
本体寸法(約)	おきた状態	幅 800mm×奥行 1300mm×高さ 1040mm	幅 700mm×奥行 1300mm×高さ 1040mm
	ねた状態	幅 800mm×奥行 1640mm×高さ 660mm	幅 700mm×奥行 1640mm×高さ 660mm
本体重量	約57kg	約55kg	約59kg
医療機器認可番号	224AGBZX00068A01 (家庭用電気マッサージ機 MODEL:NM102)	224AGBZX00068A02 (家庭用電気マッサージ機 MODEL:NM102S)	224AGBZX00068A03 (家庭用電気マッサージ機 MODEL:NM102C)
JANコード	4969173330412	4969173330429	4969173330436
メーカー希望小売価格	オープン価格		



「快王II」は傷みやすい箇所である、
枕カバー・背布・背パット・座カバー・フットレストカバーの
5か所を消耗部品として交換ができ、業務使用でも安心。



安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の方はご使用にならないでください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 医師からマッサージを禁じられている方。(例)血栓症、重度の動脈けいゆう、急性静脈けいゆう、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- 次の方は、必ず医師と相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。
 - 悪性しゅよう(腫瘍)のある方 ●妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
 - 体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状「けん(倦) 怠感、悪寒、血圧変動など」の強い時期。衰弱しているとき。) ●皮膚に創傷のある方
 - 急性疾患(疼痛性)のある方 ●骨粗しょう症の方 ●脊髄骨折の方 ●捻挫、肉離れなどの炎症性の方 ●知覚障害の方 ●心臓に障害のある方
 - ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している方 ●背骨(脊髄)に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方
 - 貧血の方 ●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方 ●安静を必要とする方 ●医師の治療を受けている方 ●上記以外に特に身体に異常を感じている方
- 乳幼児や子供に使用させたり、本機の上で遊ばせたり、本機の上に乗せたりしないでください。また自分で意思表示できない人には使用させないでください。

ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店が所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内のみ有効です。

製造販売元 **株式会社 マルタカテクノ**
静岡県藤枝市八幡字広通 550-1

発売元 **株式会社 日本メディック**
神奈川県藤沢市下土棚 468-1
TEL 0466-45-3288 FAX 0466-45-1173

販売元 **株式会社 ビッグ・ツリー**
茨城県土浦市乙戸南 3-5-19
TEL 029-834-2588 FAX 029-841-4547

- デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実際では多少色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 本パンフレットの記載内容は、平成30年5月現在のものです。